

connexx

Smart Key

Ghid de utilizare



Cuprins

Telecomanda dumneavoastră	4
Componente	5
Blocarea tastelor	6
Asocierea instrumentelor auditive	7
Vedere de ansamblu a funcțiilor	11
Informații suplimentare	13
Curățarea	13
Înlocuirea bateriei	14
Identificarea și soluționarea problemelor	18

Service	20
Ajustarea intensității semnalului	21
Informații importante privind siguranța	24
Siguranța personală	24
Siguranța produselor	26
Informații importante	29
Destinație de utilizare	29
Simboluri	30
Condiții de funcționare, transport și depozitare	32
Informații privind eliminarea	33
Informații privind conformitatea	35
Informații specifice fiecărei țări	36

Telecomanda dumneavoastră

Smart Key este o telecomandă pentru instrumentele auditive. Funcționează cu instrumentele noastre auditive specifice. Audiologul dumneavoastră vă va oferi informații în privința modelelor compatibile.




ATENȚIE

Citiți în întregime acest ghid de utilizare și urmați informațiile de siguranță din acest document pentru a evita deteriorările sau rănilile.

Componente

- ① LED de stare
- ② Butoane de volum
- ③ Inel taste
- ④ Comutator pentru blocarea tastelor
- ⑤ Buton de schimbare program
- ⑥ Instrument pentru îndepărtarea uşii bateriei

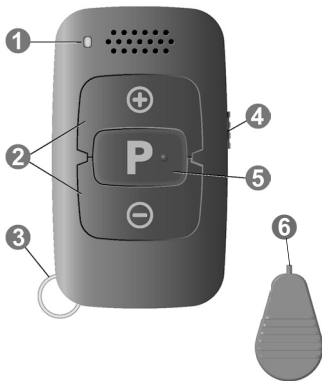

Blocarea tastelor

- Pentru a preveni orice operare accidentală în timp ce telecomanda se află în buzunar sau geantă, mutați comutatorul pentru blocarea tastelor în poziția de blocare (culoarea roșie vizibilă).



Când este activă funcția de blocare a tastelor, toate butoanele telecomenzii sunt dezactivate.

Asocierea instrumentelor auditive

Instrumentele dumneavoastră auditive trebuie împerecheate cu telecomanda. După aceasta, împerecherea este salvată în instrumentele auditive și activată la fiecare pornire.

- ▶ Blocați telecomanda (culoarea roșie vizibilă).
- ▶ Mai întâi, opriți instrumentele auditive:
Deschideți compartimentele pentru baterii. Dacă instrumentele auditive nu au un compartiment pentru baterii, opriți-le în modul descris în ghidul de utilizare furnizat cu acestea.
- ▶ Apoi, porniți instrumentele auditive.
Închideți compartimentele pentru baterii. Dacă instrumentele auditive nu au un compartiment pentru

baterii, porniți-le în modul descris în ghidul de utilizare furnizat cu acestea.

Instrumentele auditive sunt acum în modul de asociere. Aveți 3 minute pentru a finaliza asocierea. Urmăți pașii de mai jos.

- ▶ Introduceți instrumentele auditive în urechi.
- ▶ Țineți apăsat butonul **P** de pe telecomandă în timp ce comutați funcția de blocare taste la poziția de deblocare (culoarea verde vizibilă).
- ▶ Eliberați **P** butonul.

Telecomanda este acum în modul de configurare, ledul va fi aprins.



Telecomanda este acum în modul de configurare, nu apăsați $\oplus$ sau $\ominus$. Această acțiune ar modifica alte setări.

- ▶ Țineți apăsat **P** butonul până când LED-ul începe să lumineze intermitent **și** puteți auzi sunetul de confirmare în instrumentele auditive. Pot fi necesare până la 10 secunde pentru redarea sunetului de confirmare.
- ▶ Eliberați imediat **P** butonul după ce ați auzit sunetul. După eliberarea **P** butonului LED-ul va lumina în verde.
- ▶ Asigurați-vă că sunetul de confirmare este redat în ambele instrumente auditive. Atunci când îl auziți, asocierea este finalizată.

Telecomanda va rămâne în modul de configurare pentru încă 30 de secunde. Sunetul de confirmare poate fi redat din nou apăsând **P** în acest interval de 30 de secunde.

- Pentru a ieși din modul de configurare al telecomenzii, așteptați 30 de secunde sau mutați comutatorul pentru blocarea tastelor în poziția de blocare (culoarea roșie vizibilă).

Când asocierea este finalizată, telecomanda este pregătită pentru utilizare.

- Asigurați-vă că aceasta este deblocată (culoarea verde vizibilă).

Dacă instrumentele auditive nu au putut fi asociate, consultați secțiunea „Depanarea“.

Vedere de ansamblu a funcțiilor

Funcție	Descriere
Volum	 sau  Apăsați o dată pentru a regla volumul cu câte un nivel. Sau, apăsați și țineți apăsat până la atingerea volumului dorit.
Program auditiv	P apăsare scurtă  Comută la următorul program auditiv.

Funcție	Descriere
Pornire/oprire (standby)	P și ⊖ apăsare lungă (2 secunde) ➤ Pornește sau oprește instrumentele dumneavoastră auditive.
Resetare	P apăsare lungă (2 secunde) ➤ Comută la programul auditiv 1 și setează nivelul de volum implicit.

Informații suplimentare

Curățarea



NOTIFICARE

- ▶ Nu introduceți telecomanda în apă!
- ▶ Nu curățați telecomanda cu alcool sau benzină.



- ▶ Curățați telecomanda în modul necesar, folosind o cârpă moale uscată sau ușor umezită.
Folosiți doar apă distilată pentru a înmuia cârpă.
- ▶ Evitați orice agenți de curățare.

Înlocuirea bateriei

Telecomanda utilizează o baterie tip monedă CR 2450.

- ▶ Îndreptați punctul instrumentului spre gaura cheii de deasupra capacului compartimentului bateriei ❶.
- ▶ Apăsați instrumentul vertical în orificiu și, în același timp, glisați capacul compartimentului bateriei în direcția săgeții ❷.
- ▶ Scoateți bateria descărcată trăgând clapa ❸.



Notă: Utilizați instrumentul furnizat pentru a deschide capacul compartimentului bateriei. Orice instrument auto-fabricat, cum ar fi agrafele de birou, poate deteriora funcția de blocare pentru copii.

Introduceți bateria cu simbolul „+” orientat în sus:

► Glisați-o sub suport și apoi apăsați-o.



- Așezați capacul la loc împingându-l pe telecomandă.



- Pentru a închide, glisați capacul compartimentului bateriei și se va auzi un sunet "clic" atunci când sistemul de blocare pentru copii este cuplat corespunzător. **3**

Starea de împerechere este reactivată de telecomandă atunci când bateria este înlocuită. Nu trebuie să asociați instrumentele auditive din nou după înlocuirea telecomenzii.

Identificarea și soluționarea problemelor

Dacă dispozitivul nu funcționează:

- Asigurați-vă că bateria este introdusă corect. Consultați secțiunea "Înlocuirea bateriei".
- Asigurați-vă că tastele nu sunt blocate. Consultați secțiunea "Blocarea tastelor".
- Asigurați-vă că nu se află nimic între instrumentele auditive și telecomandă.

- Măriți intensitatea semnalului. Consultați secțiunea "Ajustarea intensității semnalului".
- Asociați instrumentele auditive din nou. Consultați secțiunea „Asocierea instrumentelor auditive”.
- Întrebați audiologul dacă această telecomandă este compatibilă cu instrumentele dumneavoastră auditive.

Dacă instrumentele auditive nu pot fi împerecheate:

- Măriți intensitatea semnalului. Consultați secțiunea "Ajustarea intensității semnalului".
- Asociați instrumentele auditive din nou. Consultați secțiunea „Asocierea instrumentelor auditive”.

Dacă LED-ul nu mai este aprins:

- Asigurați-vă că tastele nu sunt blocate. Consultați secțiunea "Blocarea tastelor".
- Bateria poate fi descărcată. Înlocuiți bateria descărcată.

Consultați tehnicianul acustician audioprotector dacă întâmpinați alte probleme.

Service

Dacă întâmpinați probleme tehnice cu dispozitivul, consultați audiologul pentru service. Nu efectuați service-ul sau întreținerea dispozitivului în timp ce acesta este utilizat.

Ajustarea intensității semnalului

Telecomanda funcționează prin emiterea unui semnal audio de înaltă frecvență. Acest semnal poate fi auzit de către persoanele cu vârsta sub 30 de ani. Sunt disponibile două niveluri de intensitate a semnalului de control. În mod implicit, telecomanda utilizează cea mai ridicată setare pentru a asigura o conexiune fiabilă cu instrumentele dumneavoastră auditive. O intensitate mai slabă a semnalului poate fi aleasă dacă semnalul de control îi deranjează pe ceilalți. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acest lucru poate afecta fiabilitatea conexiunii.

Pentru a ajusta intensitatea semnalului:

- Blocați telecomanda (culoarea roșie vizibilă).

► Țineți apăsat butonul **P** de pe telecomandă în timp ce comutați funcția de blocare taste la poziția de deblocare (culoarea verde vizibilă).

► Eliberați **P** butonul.

Telecomanda este acum în modul de configurare, ledul va fi aprins și intensitatea semnalului poate fi modificată.

► Pentru a comuta la **cea mai joasă** intensitate a semnalului, apăsați **⊖** până când ledul luminează intermitent lent.

Pentru a comuta la **cea mai ridicată** intensitate a semnalului, apăsați **⊕** până când ledul luminează intermitent rapid.

- ▶ Pentru a ieși din modul de configurare al telecomenzii, așteptați 30 de secunde sau mutați comutatorul pentru blocarea tastelor în poziția de blocare (culoarea roșie să fie vizibilă).
- ▶ Pentru a continua utilizarea telecomenzii, asigurați-vă că aceasta este deblocată (culoarea verde vizibilă).

Informații importante privind siguranța

Siguranța personală



AVERTISMENT

Pericol de sufocare!

Dispozitivul dumneavoastră conține componente mici care pot fi înghițite.

- ▶ Nu lăsați instrumentele auditive, bateriile și accesoriile la îndemâna copiilor și persoanelor cu dizabilități mintale.
- ▶ În cazul ingerării componentelor, adresați-vă imediat unui medic sau unei unități medicale.



AVERTISMENT

Pericol de rănire!

- ▶ Nu utilizați dispozitive care sunt în mod evident defecte și returnați-le la punctul de vânzare.



AVERTISMENT

Vă rugăm să țineți cont de faptul că modificările neautorizate ale produsului pot cauza daune ale acestuia sau răni.

- ▶ Utilizați doar componente și accesorii aprobate. Solicitați asistență din partea audiologului dumneavoastră.



AVERTISMENT

Risc de explozie!

- ▶ Nu utilizați telecomanda în atmosfere explozive (de. ex. în zone miniere).

Siguranța produselor



NOTIFICARE

- ▶ Protejați dispozitivele împotriva căldurii extreme. Nu le expuneți la lumina directă a soarelui.



NOTIFICARE

- ▶ Protejați dispozitivele împotriva umidității ridicate.



NOTIFICARE

- ▶ Nu uscați dispozitivele într-un cuptor cu microunde.



NOTIFICARE

Tipuri diferite de radiații puternice, de. ex. în timpul examinărilor Rx sau examinărilor MRI ale capului, pot defecta dispozitivele.

- ▶ Nu utilizați dispozitivele în timpul acestor proceduri sau în timpul unor proceduri similare.

Radiațiile slabe, de. ex. emise de un echipament radio sau de echipamentele de securitate din cadrul aeroportului nu pot defecta dispozitivele.



NOTIFICARE

- Telecomanda este programată pentru a comunica exclusiv cu instrumentele dumneavoastră auditive. Dacă experimentați probleme din cauza interferențelor cu telecomanda unei alte persoane, consultați audiologul.

Informații importante

Destinație de utilizare

Telecomanda este destinată operării instrumentelor auditive.



Utilizați telecomanda doar conform descrierii din acest ghid de utilizare.

Dispozitivul nu este destinat utilizării și operării de către copii cu vârsta sub 12 ani sau de către persoane cu o vârstă de dezvoltare sub 12 ani.

Simboluri

Simboluri utilizate în acest document



Indică o situație care ar putea duce la accidentări grave, moderate sau minore.



Indică posibile daune materiale.



Recomandări și sfaturi despre o mai bună manipulare a dispozitivului dumneavoastră.

Simboluri pe dispozitiv sau ambalaj



Citiți și urmați instrucțiunile din ghidul de utilizare.



Etichetă de conformitate CE, confirmă conformitatea cu anumite Directive Europene.

Consultați secțiunea „Informații privind conformitatea”.



Nu eliminați acest dispozitiv la deșeuri menajere.
Consultați secțiunea „Informații privind eliminarea”.



Condiții de funcționare, transport și depozitare

Condiții de operare

Temperatură	între 0 și 45 °C
-------------	------------------

Umiditate relativă	între 5 și 93 %
--------------------	-----------------

În timpul perioadelor prelungite de transport și depozitare, vă rugăm să respectați următoarele condiții:

	Depozitare	Transport
--	------------	-----------

Temperatură	între 10 și 40 °C	între -20 și 60 °C
-------------	-------------------	--------------------

Umiditate relativă	între 10 și 80 %	între 5 și 90 %
--------------------	------------------	-----------------

Pentru alte componente, precum bateriile, se pot aplica alte condiții.



AVERTISMENT

Risc de rănire, incendiu sau explozie în timpul livrării.

- Livrați acumulatorii cu litiu respectând reglementările locale.

Informații privind eliminarea

În Uniunea Europeană, echipamentele marcate intră sub incidența „Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice”.

Modificată prin „Directiva 2003/108/CE” (DEEE).



NOTIFICARE

- ▶ Reciclați instrumentele auditive, accesoriile și ambalajele respectând reglementările naționale.



NOTIFICARE

- ▶ Pentru a evita poluarea mediului înconjurător, nu aruncați bateriile la gunoiul menajer.
- ▶ Reciclați sau depuneți la deșeuri bateriile respectând reglementările naționale sau returnați-le la audiologul dumneavoastră.

Informații privind conformitatea

Marcajul CE arată conformitatea cu următoarele directive europene: 93/42/EEC privind dispozitivele medicale și 2011/65/EU RoHS privind restricționarea substanțelor periculoase.



Informații specifice fiecărei țări



Producător legal

WSAUD A/S

Nymøllevej 6,

3540 Lynge

Danemarca

Document No. 02985-99T02-3B00 RO

Order/Item No. 109 409 95

Master Rev04, 10.2020

© 02.2021 WSAUD A/S. All rights reserved,



www.sivantos.com